

EM-Tec コンパクトバイスサンプルホルダー

多様な試料のクリーンな保持



イントロダクション

バイス型サンプルホルダーは、素早く簡単に使用できます。可動式のジョーの間にサンプルを挟み込むことでサンプルを保持するため、サンプルの装填が迅速になり、ダウンタイムを削減できます。

特に、類似のサンプルや同じサンプルのシリーズを検査する必要がある場合に便利です。

バイスサンプルホルダーを使用すると、導電性接着剤や接着剤を使用するよりも簡単、迅速、そしてきれいに試料測定ができます。バイスでサンプルを固定し、高解像度イメージングに必要な剛性を確保します。現在入手可能なコンパクト型およびスプリング式 EM-Tec SEM サンプルホルダーは以下のとおりです。

- **EM-Tec V14** 小型バイスサンプルホルダー。取り外し可能なジョーを備え、最大 15mm のサンプルに対応します。固定ジョー1個と、取り外し可能なスピンドル駆動ジョー1個を備えています。可動ジョーの容量は 0~13mm です。ジョーを動かさずに（スピンドルでサンプルを保持）、試料サイズは 0~15mm です。
この小型バイスは、小型サンプルや卓上 SEMS に最適です。真空グレードのアルミニウムと真鍮スピンドルで作られています。
- **EM-Tec V22** コンパクトバイスサンプルホルダーは、0~22mm のサンプルサイズに対応しています。固定ジョー1個とスピンドル駆動の可動ジョー1個を備えています。標準 SEM と卓上 SEM の両方で使用できるコスト効率の高いコンパクトなバイスホルダーです。真空グレードのアルミ製、真鍮スピンドル、ステンレスのネジで作られています。

- **EM-Tec V22L** は、EM-Tec V22 コンパクトバイスホルダーのロープロファイルバージョンです。ジョーの高さは 10mm ではなく 3mm ですが、その他の仕様は同じです。
- **EM-Tec MV22** は、コンパクトなバイスホルダー（0~22mm）と、最大 5 本の標準 12.7mm ピンスタブを装着できるマルチピンスタブホルダーを組み合わせた製品です。この費用対効果の高いマルチホルダーは、卓上 SEM や小型試料ステージを備えた SEM 向けに設計されています。固定ジョー1つと、もう一方のジョーを動かすスピンドルドライブを備えています。真空グレードのアルミ製、真鍮スピンドル、ステンレス製のネジで作られています。
- **EM-Tec 3V22** トリプルコンパクトバイスホルダーは、1 つのベースプレートに 3 つの個別に調整可能な EM-Tec V22 コンパクトバイスを装備しています。3 つの異なるサンプルを保持・検査できるため、SEM のベントとポンピングにかかる時間を節約できます。真空グレードのアルミ製、真鍮スピンドル、ステンレス製のネジで作られています。
- **Tec PV18** 精密バイスは、最大 18mm のバルクサンプルと最大 24mm の平面サンプル（チップ）に対応しています。
このバイスは、固定ジョーとスピンドル駆動の可動ジョーで構成されています。凹んだバイスジョーにより、シリコンチップ、金属板、断面などの薄いサンプルをクランプすることが可能になります。スピンドルとガイドバーからの高さは 7mm です。AISI 304 ステンレス鋼製です。
- **EM-Tec VS8** ミニシングルアクションスプリング式バイスは、最大クランプサイズ 8mm のサンプルに対応しています。バイスは可動バイスジョーを引くことで開きます。薄い断面を素早くセットするのに最適です。バイスベースの寸法は $\varnothing 25 \times$ 高さ 12.5mm です。真空グレードのアルミ製とステンレス製のロッドおよびスプリングで作られています。
- **EM-Tec VS12** は、最大クランプサイズが 12 mm のサンプル用のコンパクトなシングルアクション スプリング式バイスです。バイスは、プッシュロッドで可動バイスのジョーを押すことで開きます。プッシュロッドは、ホルダーを SEM に装着した状態で取り外すことができます。固定ジョーと可動ジョーにダボピンを挿入することで、開口部を最大 18mm 径まで広げたり、複雑な形状のサンプルを保持したりできます。ダボピンは 4 本付属しています。真空グレードのアルミニウム製で、ロッドとスプリングはステンレススチール製です。
- **EM-Tec VS26** は、最大クランプサイズが 26 mm のサンプル用のコンパクトなダブルアクション スプリング式センタリングバイスです。両面スプリングにより、このバイスはセンタリングバイスとして機能します。
バイスのジョーはプッシュロッドによって開きますが、サンプルホルダーを SEM に装着する際にはプッシュロッドを取り外すことができます。
ダボピンをジョーに挿入すると、開口部を最大直径 34 mm のサンプル サイズまで拡大したり、不規則な形状のサンプルを保持したりできます。ダボピンは 4 本付属しています。真空グレードのアルミニウムとステンレス鋼のロッドおよびスプリングで作られています。
- **EM-Tec VS42** は、ユニバーサル両面スプリング式大型センタリングバイス、最大バイス開口部 42 mm のサンプル用です。EM-Tec ユニバーサル スプリング式バイスには、さまざまなタイプのジョーを取り付けることができます。ジョーを引くと開きます。真鍮製のスライダーにダボピンを挿入することで、開口部を広げ、複雑な形状のサンプルを保持できます。ダボピンを使用すると、直径 50mm までのディスクを保持できます。ダボピンは 4 本付属しています。三重溝付き/滑らかなバイスジョーが付属しています。

オプションでご用意しているバイスジョーは以下のとおりです。

- 円形サンプル用の 120° の大きな溝が 1 つ付いたバイスジョー
- 3 つの溝があり滑らかな側面を持つ標準のバイスジョー。バイスジョーを積み重ねてジョーの高さを 12 ～ 24 mm に増やすことができます。

真空グレードのアルミニウム、真鍮製のスライダー、ステンレス鋼製のロッドとスプリングで作られています。EM-Tec バイスサンプルホルダーは、ピン付きと M4 ネジ穴付きからお選びいただけます。

JEOL SEM で使用する場合は、EM-Tec SEM スタブ アダプターの使用をお勧めします。

EM-Tec コンパクトおよびユニバーサルバイスクランプホルダーの仕様:

パーツ番号	タイプ	寸法	最大試料サイズ	クランプ方式	対応ステージ
12-003219	V14	25x25x12.5mm	13/15mm	スピンドル駆動	3.2mm ピン
12-003319	V14	25x25x12.5mm	13/15mm	スピンドル駆動	M4
12-000200	V22	39x25x22mm	22mm	スピンドル駆動	3.2mm ピン
12-000300	V22	39x25x22mm	22mm	スピンドル駆動	M4
12-002200	V22L	39x25x15mm	22mm	スピンドル駆動	3.2mm ピン
12-003200	V22L	39x25x15mm	22mm	スピンドル駆動	M4
12-000201	MV22	39x25x22mm	22mm	スピンドル駆動	3.2mm ピン
12-000301	MV22	39x25x22mm	22mm	スピンドル駆動	M4
12-002400	3V22	39x76x27mm	22mm (3x)	スピンドル駆動(3x)	3.2mm ピン
12-003400	3V22	39x76x27mm	22mm (3x)	スピンドル駆動(3x)	M4
12-002217	PV18	48x25x27mm	18 / 24mm	スピンドル駆動	3.2mm ピン
12-003317	PV18	48x25x27mm	18 / 24 mm	スピンドル駆動	M4
12-002228	VS8	25x30x12.5mm	8mm	スプリング-ロード	3.2mm ピン
12-003228	VS8	25x30x12.5mm	8mm	スプリング-ロード	M4
12-000221	VS12	30x25x12mm	12mm / Ø18mm	スプリング-ロード	3.2mm ピン
12-000321	VS12	30x25x12mm	12mm / Ø18mm	スプリング-ロード	M4
12-000222	VS26	50x25x12mm	26mm / Ø34mm	スプリング-ロード	3.2mm ピン
12-000322	VS26	50x25x12mm	26mm / Ø34mm	スプリング-ロード	M4
12-000220	VS42	76x51x26mm	42mm / Ø50mm	スプリング-ロード	3.2mm ピン
12-000320	VS42	76x51x26mm	42mm / Ø50mm	スプリング-ロード	M4

ピン スタブを使用する SEM、TFS、FEI、Philips、Zeiss、LEO、Tescan、Aspex、RJLee、AmRay、Cambridge Instruments、Leica、CamScan SEM 用の EM-Tec コンパクトおよびユニバーサル バイスクランプホルダー

EM-Tec VS8 バイスクランプホルダー ミニスプリング式 最大 8mm、ピン用



EM-Tec VS8 は、最大クランプサイズが 8 mm のサンプル用のミニシングルアクションスプリング式バイスです。バイスは、可動バイスのジョーを引くことによって開きます。Ideal for quickly 薄い断面をロードします。バイスベースの寸法は $\varnothing 25 \times$ 高さ 12.5mm です。真空グレードのアルミとステンレス鋼のロッドおよびスプリングで作られています。

パーツ番号

数量

価格

12-002228

1 個

¥ 19,700

EM-Tec V14 小型バイスクランプサンプルホルダー、取り外し可能なジョー、ピン付き



EM-Tec V14 は、最大 15 mm のサンプルに対応する、取り外し可能なジョーを備えた小型バイスサンプルホルダーです。固定ジョー 1 個と取り外し可能なスピンドル駆動ジョー 1 個で構成されています。可動ジョー使用時の可動範囲は 0~13mm です。可動ジョーなし（スピンドルでサンプルを保持）の容量は 0~15mm です。この小型バイスは、小型サンプルやテーブルトップ SEMS に最適です。真空グレードのアルミと真鍮のスピンドルで作られています。

パーツ番号

数量

価格

12-003219

1 個

¥27,600

EM-Tec V22 コンパクトバイス型サンプルホルダー（最大 22mm、ピン）



EM-Tec V22 コンパクトバイスサンプルホルダーは、ピン付きで 0～22mm のサンプルサイズに対応します。固定ジョー1 個とスピンドル駆動の可動ジョー1 個を備えています。ジョーの高さは 10mm、クランプ幅は 25mm です。標準 SEM と卓上 SEM の両方で使用できる、コスト効率の高いコンパクトなバイスです。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000200	1 個	¥36,300

EM-Tec V22L 薄型コンパクトバイス型サンプルホルダー（最大 22mm、ピン）



EM-Tec V22L コンパクトバイスサンプルホルダーは、ピン付きで 0～22mm のサンプルサイズに対応します。固定ジョー1 個とスピンドル駆動の可動ジョー1 個を備えています。ジョーの高さは 3mm、クランプ幅は 25mm です。標準 SEM と卓上 SEM の両方で使用できる、コストパフォーマンスに優れたコンパクトなバイスです。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-002200	1 個	¥39,500

EM-Tec MV22 複合コンパクトバイス（0-22mm）とマルチピンスタブホルダー、ピン




EM-Tec MV22 は、コンパクトなバイスホルダー（0 ～ 22 mm）と、最大 5 個の標準 12.7 mm ピンスタブを収容できるマルチピンスタブホルダーを組み合わせたものです。このコスト効率の高いマルチホルダーは、テーブルトップ SEM および小型の試料ステージを備えた SEM 用に設計されています。固定ジョー1 つと、もう一方のジョーを動かすスピンドルドライブを備えています。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000201	1 個	¥42,900

EM-Tec PV18 精密バイスランプサンプルホルダー


最大 18mm のサンプル用、AISI 304、ピン

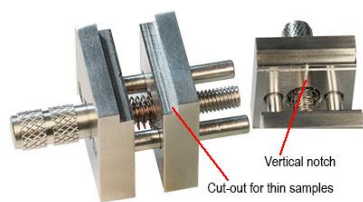

EM-Tec PV18 精密バイスサンプルホルダーは、0～18mm のバルクサンプルと 6～24mm の薄片サンプルに対応しています。固定ジョー1個とスピンドル駆動式可動ジョー1個を備えています。この精密バイスは、小型から中型のサンプルや卓上 SEMS に最適です。可動ジョーには、針状のサンプルを保持するための垂直および水平のノッチが付いています。AISI 304 ステンレス鋼製です。

パーツ番号	数量	価格
12-002217	1 個	¥41,800

EM-Tec PV26 精密バイス（最大 26mm のサンプル用、標準ピン）

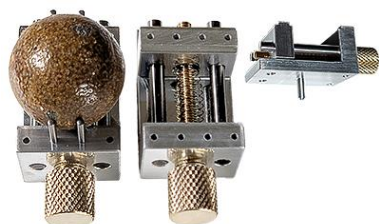

EM-Tec PV26 精密バイス サンプル ホルダーは、0 ～ 26 mm のバルク サンプルと 6 ～ 29 mm の薄いサンプルに使用できます。1 つの固定ジョーと 1 つの可動スピンドル駆動ジョーで構成されています。この精密バイスは小型から中型のサンプルに最適です。両方のジョーには、薄いサンプル用の切り込みとピン用の穴が付いています。ピンを使用することで、最大 32mm の複雑な形状のサンプルを保持できます。真空グレードのアルミと真鍮製のスピンドルで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-002218	1 個	¥39,200

EM-Tec 3V22 トリプルコンパクトバイスサンプルホルダー（3x 最大 22mm のサンプル用、ピン）



EM-Tec 3V22 トリプル コンパクト バイス ホルダーには、1 つのベース プレート上に個別に調整可能な EM-Tec V22 コンパクト バイスが 3 つ含まれています。

3 種類の異なるサンプルを保持・観察できるため、SEM のベントとポンピングにかかる時間を節約できます。真空グレードのアルミ、真鍮製スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-002400	1 個	¥167,000

EM-Tec VS12 コンパクトシングルアクションスプリング式バイスホルダー（最大 12mm、ピン用）



EM-Tec VS12 は、最大クランプサイズが 12 mm のサンプル用のコンパクトなシングルアクション スプリング式バイスです。バイスは、プッシュロッドで可動バイスのジョーを押すことで開きます。プッシュロッドは、ホルダーを SEM に装着した状態で取り外すことができます。固定ジョーと可動ジョーにダボピンを挿入して、開口部を最大直径 18 mm のサンプル サイズまで拡大したり、複雑な形状のサンプルを保持したりできます。ダボピンが 4 本付属しています。真空グレードのアルミとステンレス製のロッドおよびスプリングで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000221	1 個	¥55,000

EM-Tec VS26 コンパクトダブルアクションスプリング式センタリングバイスホルダー 最大 26mm、ピン



EM-Tec VS26 は、ピン付きで最大クランプサイズが 26 mm のコンパクトなダブルアクション スプリング式サンプルバイスです。両面スプリングにより、このバイスはセンタリングバイスとして機能します。バイスのジョーはプッシュロッドによって開きますが、サンプルホルダーが SEM に装填されているときに取り外すことができます。ダボピンをジョーに挿入してサンプルのサイズを最大直径 34 mm まで拡大したり、不規則な形状のサンプルを保持したりできます。ダボピンが 4 本付属しています。真空グレードのアルミとステンレス製のロッドとスプリングで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000222	1 個	¥ 74,500

EM-Tec VS42 ユニバーサルスプリング式大型センタリングバイスホルダー（最大 42mm、ピン）



EM-Tec VS42 は、最大 42mm の開口を持つサンプル用の、両面スプリング式大型ユニバーサルバイスです。様々なタイプのジョーを取り付けることができます。ジョーを引くことで開きます。ダボピンを真鍮製スライダーに挿入することで、開口部を広げ、複雑な形状のサンプルを固定できます。ダボピンを使用すると、直径最大 50mm のディスクを固定できます。ダボピンは 4 本付属しています。3 本の溝付きで滑らかなリバーシブルバイスジョーが付属しています。オプションで利用可能なバイスジョーは以下の通りです。円形サンプル用の 120° の大きな溝が 1 つ付いたバイスジョー、3 つの溝/滑らかな側面を備えた標準的なリバーシブルバイスジョー。バイスジョーを積み重ねてジョーの高さを 12mm から 24mm まで増やすことができます。真空グレードのアルミ、真鍮のスライダー、ステンレス製のロッドとスプリングで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000220	1 個	¥61,800

日立 SEM 用 EM-Tec コンパクトおよびユニバーサルバイスクランプホルダー および多用途 EM-Tec ステージ SEM ステージアダプター


EM-Tec VS8 ミニスプリング式バイスホルダー 最大 8mm、M4 用



EM-Tec VS8 は、最大クランプサイズが 8 mm のサンプル用のミニシングルアクションスプリング式バイスです。可動バイスのジョーを引くことでバイスが開きます。薄い断面を素早くセットするのに最適です。ベースは直径 25mm、高さ 12.5mm です。真空グレードのアルミで、ロッドとバネはステンレス製です。

パーツ番号	数量	価格
12-003228	1 個	¥19,400

EM-Tec V14 小型バイスクランプサンプルホルダー、取り外し可能なジョー付き M4

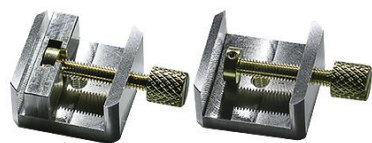

EM-Tec V14 小型バイスサンプルホルダー。最大 15mm のサンプルに対応。取り外し可能なジョー付き。固定ジョー1 個と、取り外し可能なスピンドル駆動ジョー

1 個付き。可動ジョー使用時の可動範囲は 0～13mm、可動ジョーなし（スピンドルでサンプルを保持）時の容量は 0～15mm です。この小型バイスは、小型サンプルや卓上 SEMS に最適です。真空グレードのアルミと真鍮スピンドルで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-003319	1 個	¥27,300


EM-Tec V22 コンパクトバイス型サンプルホルダー 最大 22mm、M4



EM-Tec V22 コンパクトバイスサンプルホルダーは、M4 ネジ付きで 0～22mm のサンプルサイズに対応します。固定ジョー1 個とスピンドル駆動の可動ジョー1 個を備えています。ジョーの高さは 10mm、クランプ幅は 25mm です。標準 SEM と卓上 SEM の両方で使用できる、コスト効率の高いコンパクトなバイスです。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-000300	1 個	¥35,500

EM-Tec V22L 薄型コンパクトバイス型サンプルホルダー 最大 22mm、M4

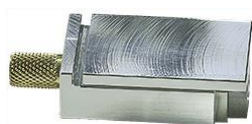

EM-Tec V22L コンパクトで薄型のバイスサンプルホルダー。M4 ネジ付きで、サンプルサイズは 0～22mm まで対応。固定ジョー1 個とスピンドル駆動の可動ジョー1 個を備えています。ジョーの高さは 3mm、クランプ幅は 25mm です。標準 SEM と卓上 SEM の両方で使用できる、コストパフォーマンスに優れたコンパクトなバイスです。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-003200	1 個	¥38,800

EM-Tec MV22 複合コンパクトバイス (0-22mm) とマルチピンスタブホルダー、M4

	EM-Tec MV22 は、コンパクトなバイスホルダー (0 ~ 22 mm) と、最大 5 個の標準 12.7 mm ピンスタブを収容できるマルチピンスタブホルダーを組み合わせたものです。このコスト効率の高いマルチホルダーは、テーブルトップ SEM および小型の試料ステージを備えた SEM 用に設計されています。1 つの固定ジョーとスピンドル駆動により、他のジョーを移動します。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス鋼のネジで作られています。	
パーツ番号	数量	価格
12-000301	1 個	¥42,100

EM-Tec PV18 精密バイスクランプサンプルホルダー 最大 18mm、AISI 304、M4

	EM-Tec PV18 精密バイスサンプルホルダーは、0 ~ 18 mm のバルクサンプルと 6 ~ 24 mm の薄いサンプルに使用できます。1 つの固定ジョーと 1 つの可動スピンドル駆動ジョーで構成されています。 この精密バイスは、小型から中型のサンプルや卓上 SEMS に最適です。可動式のジョーには、針状のサンプルを固定するための縦横のノッチが付いています。AISI 304 ステンレス鋼製です。	
パーツ番号	数量	価格
12-003317	1 個	¥41,100

EM-Tec PV26 精密バイス 最大 26mm のサンプルに対応、M4 ネジ穴付き

	EM-Tec PV26 精密バイスサンプルホルダーは、0 ~ 26 mm のバルクサンプルと 6 ~ 29 mm の薄いサンプルに使用できます。固定ジョー1個とスピンドル駆動の可動ジョー1個を備えた精密バイス。小型から中型のサンプルに最適です。両方のジョーには、薄いサンプル用の切り込みとピン用の穴が付いています。ピンを使用することで、最大 32mm の複雑な形状のサンプルを保持できます。真空グレードのアルミと真鍮製のスピンドルで作られています。	
パーツ番号	数量	価格
12-003318	1 個	¥39,300

EM-Tec 3V22 トリプルコンパクトバイスサンプルホルダー
最大 22mm のサンプルを 3 個まで保持可能、M4



EM-Tec 3V22 トリプル コンパクト バイス ホルダーには、1 つのベース プレート上に個別に調整可能な EM-Tec V22 コンパクト バイスが 3 つ含まれています。3 種類の異なるサンプルを保持・観察できるため、SEM のベントとポンピングにかかる時間を節約できます。真空グレードのアルミ、真鍮スピンドル、ステンレス製ネジで作られています。

パーツ番号	数量	価格
12-003400	1 個	¥165,000

EM-Tec VS12 コンパクトシングルアクションスプリング式バイスホルダー **最大 12mm、M4 用**



EM-Tec VS12 は、最大クランプサイズが 12 mm のサンプル用のコンパクトなシングルアクション スプリング式バイスです。バイスは、プッシュロッドで可動バイスのジョーを押すことで開きます。プッシュロッドは、ホルダーを SEM に装着した状態で取り外すことができます。固定ジョーと可動ジョーにダボピンを挿入して、開口部を最大直径 18 mm のサンプル サイズまで拡大したり、複雑な形状のサンプルを保持したりできます。ダボピンが 4 本付属。真空グレードのアルミニウム製で、ロッドとスプリングはステンレススチール製です。

パーツ番号	数量	価格
12-000321	1 個	¥54,700

**EM-Tec VS26 コンパクト ダブルアクション スプリング式センタリングバイスホルダー
最大 26mm、M4**



EM-Tec VS26 は、M4 ネジで最大クランプ サイズが 26 mm のコンパクトなダブル アクション スプリング式サンプル バイスです。両面スプリングにより、このバイスはセンタリングバイスとして機能します。バイスのジョーはプッシュロッドによって開きますが、サンプルホルダーを SEM に装着する際にはプッシュロッドを取り外すことができます。ダウエルピンをジョーに挿入することで、サンプルサイズを最大 34mm まで拡大したり、不規則な形状のサンプルを保持したりできます。ダウエルピンは 4 本付属しています。真空グレードのアルミニウムとステンレス鋼のロッドとスプリングで作られています。

パーツ番号

数量

価格

12-000322

1 個

¥73,800

EM-Tec VS42 ユニバーサルスプリング式大型センタリングバイスホルダー 最大 42mm、M4



EM-Tec VS43 は、最大バイス開口部が 42 mm のサンプル用の、両面スプリング式ユニバーサル大型バイスです。EM-Tec ユニバーサルスプリング式バイスには、さまざまなタイプのジョーを取り付けることができます。ジョーを引くことで開きます。真鍮製のスライダーにダボピンを挿入することで、開口部を広げ、複雑な形状のサンプルを保持できます。ダボピンを使用すると、直径 50mm までのディスクを保持できます。ダボピンが 4 本付属しています。三重溝付き／滑らかなリバーシブルバイスジョーが付属しています。オプションでバイスジョーをご用意しています：円形サンプル用の 120° の大きな溝が 1 つ付いたバイスジョー、三重溝付き／滑らかな側面を備えた標準的なリバーシブルバイスジョー。バイスジョーを積み重ねることで、ジョーの高さを 12mm から 24mm まで増やすことができます。真空グレードのアルミ、真鍮のスライダー、ステンレス製のロッドとスプリングで作られています。

パーツ番号

数量

価格

12-000320

1 個

¥61,100

EM-Tec VS42 ユニバーサル両面スプリング式大型バイスクランプ用追加バイスクランププレート

EM-Tec CVC1 標準トリプル溝/スムースジョー、12x40x6mm



EM-Tec CVC1 標準の 3 重溝/滑らかなバイスジョーには、片側に 3 つの浅い 90° 溝があり、小型サンプルや円形サンプルのクランプ力が向上します。バイスのジョーは、サンプルに跡が残らないように滑らかな面で取り付けることができます。バイスジョーは上下に重ねて取り付けることができ、バイスジョーの高さを 2 倍の 24mm に増やすことができます。EM-Tec CVC1 標準バイスジョーのサイズは 12x40x6mm です。

パーツ番号	数量	価格
12-003204	1 個	¥12,800

EM-Tec CVC2 シングルラージ 120 度溝バイスジョー、12x40x6mm



Em-Tec CVC2 オプションの大型 120° 溝バイスジョーは、大きな丸い物体をクランプするのに使用できます。標準のジョーバイスの代わりに使用できます。必要に応じて、バイスジョーを 2 つ重ねて取り付けることで、バイスジョーの高さを 24mm まで上げることができます。EM-Tec CVC2 大型 120° 溝バイスジョー（シングル）のサイズは 12x40x6mm です。

パーツ番号	数量	価格
12-003205	1 個	¥13,100



備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4

TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106

www.elminet.co.jp compact vise sample holder 2506A3